

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Silikonové masážní baňky a anticelulidní masér

SYMBOL: 24387; EAN/GTIN: 5907451342121

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - POKYNY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ

Silikonové masážne banky a anticelulidný masér

SYMBOL: 24387; EAN/GTIN: 5907451342121



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS

Čínská silikonová baňkovací sada je profesionální nástroj určený pro masáž těla, podporující boj proti celulitidě, zlepšení krevního oběhu a uvolnění svalů. Sada umožňuje díky čtyřem baňkám různých průměrů a ergonomickému maséru komplexní péči o celé tělo. Baňky vyrobené z vysoce kvalitního silikonu jsou flexibilní a snadno se používají, takže jsou ideální volbou pro začátečníky i pokročilé.

TIP

- Výrobek by měl být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte servisní linku.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Příprava kůže:

- Před masáží pokožku očistěte a osušte.
- Aplikujte olivový olej, masážní olej nebo balzám, abyste usnadnili pohyb baňek a masážního přístroje.

Aplikace baňkování:


- Vyberte si správné baňky v závislosti na partii těla:
- 6 cm: Stehna, hýždě, záda.
- 4,4 cm: Břicho, lýtka.
- 2,5 cm: Paže, krk.
- 1 cm: Obličej, těžko dostupná místa.
- Stiskněte baňku, abyste odstranili vzduch, a poté jej přiložte na pokožku, abyste vytvořili sací efekt.
- Krouživými nebo lineárními pohyby po dobu 5–10 minut jemně pohybujte baňkou po pokožce.

Použití masážního přístroje:

- Uchopte masér za ergonomickou rukojeť.
- Krouživými a lineárními pohyby pohybujte masážními válečky po kůži směrem k srdci.
- Účel: Anticelulitidová masáž, zlepšení krevního oběhu, uvolnění svalů.

Po masáži:

- Kůži očistěte vlhkým hadříkem nebo omyjte pod tekoucí vodou.
- Umyjte baňky a masér v teplé mýdlové vodě a poté důkladně osušte.

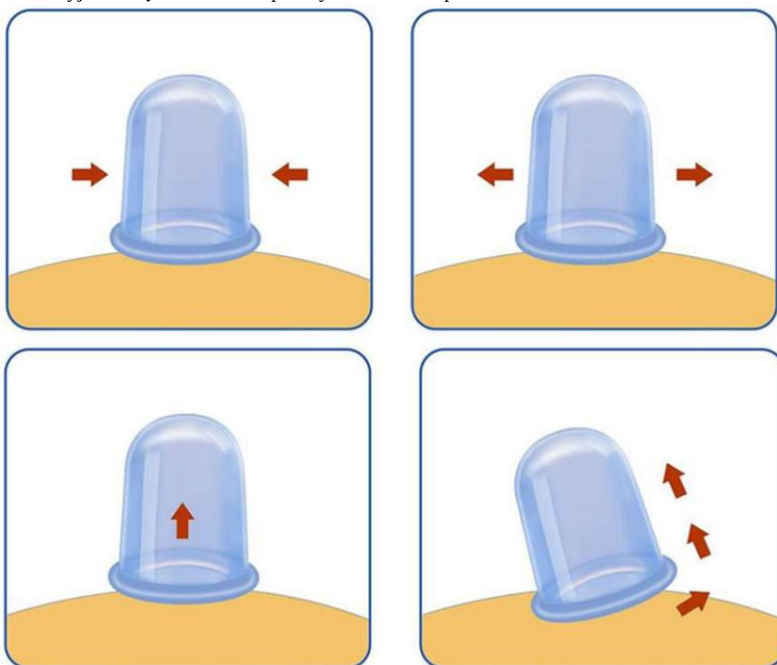

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Materiál baňky: **lékařský silikon**
- Průměry baňek: 6 cm, 4,4 cm, 2,5 cm, 1 cm
- Masážní přístroj: Plastový s ergonomickou rukojetí a válečky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.
- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Nepoužívejte na podrážděnou, poškozenou, poraněnou nebo popálenou pokožku.
- Nepoužívejte na oblasti s křečovými žilami, záněty nebo blízko srdce.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Baňkování používejte maximálně 15 minut na každou část těla.
- Pokud se během masáže objeví bolest nebo nepohodlí, přerušete masáž.
- Baňky a masér jsou určeny pouze pro vnější použití.
- Sadu skladujte na suchém místě, mimo zdroje tepla.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Uchovávejte fóliový obal výrobku mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- Vyhněte se zdrojům vznícení: vyhněte se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár)
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, rozpouštědly.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Pokud bezpečné používání již není možné, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečné používání již není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena.
- Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez upozornění.

SK

Vážený pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS

Čínska silikónová bankovacia sada je profesionálna pomôcka určená na masáž tela, podporujúcu boj proti celulitíde, zlepšenie krvného obehu a uvoľnenie svalov. Vďaka štyrom bankam rôznych priemerov a ergonomickému masérku umožňuje súprava komplexnú starostlivosť o celé telo. Banky vyrobené z kvalitného silikónu sú flexibilné a ľahko sa používajú, vďaka čomu sú ideálnou voľbou pre začiatočníkov aj pokročilých používateľov

TIP

- Výrobok je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy kontaktujte prosím servisnú linku.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Príprava pokožky:

- Pred masážou pokožku očistite a osušte.
- Naneste olivový olej, masážny olej alebo balzam, aby ste uľahčili pohyb baniek a maséru.

Aplikácia bankovania:


- Vyberte si správnu banku v závislosti od partie tela:
- 6 cm: stehná, zadok, chrbát.
- 4,4 cm: Brucho, lýtko.
- 2,5 cm: Paže, krk.
- 1 cm: Tvár, ťažko dostupné miesta.
- Stlačte banku, aby ste odstránili vzduch, a potom ju priložte na pokožku, aby sa vytvoril sací efekt.
- Jemne posúvajte banku po pokožke krúživými alebo lineárnymi pohybmi po dobu 5–10 minút.

Použitie maséra:

- Uchopte masér za ergonomickú rukoväť.
- Krúživými a lineárnymi pohybmi pohybujte masážnymi valčekmi po pokožke smerom k srdcu.
- Účel: Anticelulitídna masáž, zlepšenie krvného obehu, uvoľnenie svalov.

Po masáži:

- Kožu očistite vlhkou handričkou alebo umyte pod tečúcou vodou.
- Umyte banky a masér v teplej mydlovej vode a potom dôkladne osušte.

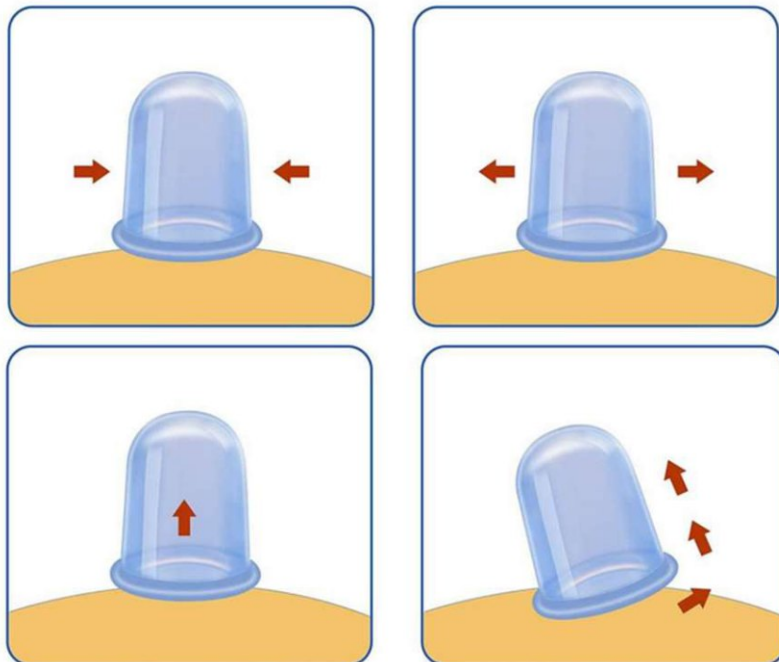

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Materiál baňky: **lekársky silikón**
- Priemer pohárov: 6 cm, 4,4 cm, 2,5 cm, 1 cm
- Masážny prístroj: Plastový s ergonomickou rukoväťou a valčekmi

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním produktu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú z toho vyplývajúcim rizikám.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Nepoužívajte na podráždenú, poškodenú, poranenú alebo popálenú pokožku.
- Nepoužívajte na miesta s kĺčovými žilami, zápalmi alebo v blízkosti srdca.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Bankovanie používajte maximálne 15 minút na každú časť tela.
- Ak sa počas masáže vyskytne bolesť alebo nepohodlie, prerušte masáž.
- Banky a masér sú určené len na vonkajšie použitie.
- Súpravu skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Fóliový obal výrobku uchovávajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenía)
- Vyhýbajte sa zdrojom zapálenia: vyhýbajte sa kontaktu s plameňmi alebo zariadeniami generujúcimi teplo (môže spôsobiť požiar)
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, rozpúšťadlami.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodený výrobok.
- Ak už nie je možná bezpečná používanie, prestaňte výrobok používať a zaistite ho proti opätovnému použitiu. Bezpečné používanie už nie je možné, ak: - bol výrobok poškodený, - nefunguje správne, - bol dlhší čas skladovaný v nepriaznivých podmienkach alebo - bol počas prepravy nadmerne zaťažovaný.
- Je zakázané používať výrobok, ak je niektorá časť poškodená.
- Vždy používajte výrobok podľa určenia.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na miesto likvidácie odpadu určené miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.
Výhradzujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a údajov o produkte bez upozornenia.

Dovozce / Dovoźca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10
internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl