


(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Akupresurní masážní podložka na nohy - modrá
SYMBOL: 14213_N EAN/GTIN: 5907451310847

Akupresurní masážní podložka na nohy - černá
SYMBOL: 14213_CZ EAN/GTIN: 5907451310830

Akupresurní masážní podložka na nohy - zelená
SYMBOL: 14213_Z EAN/GTIN: 5907451310854

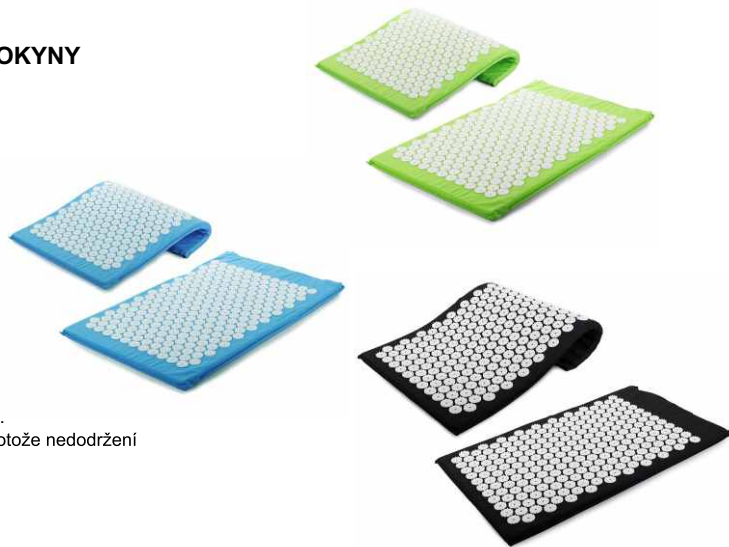

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!
Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.
Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS

Akupresurní podložka je obdélníková podložka vybavená stovkami hrotů uspořádaných do specifického vzoru. Každý hrot vytváří mikrotlakové body, které stimulují receptory na kůži. Podložka má 230 masážních rozet a velkou dopadovou plochu, díky čemuž má zvýšenou terapeutickou účinnost. Podložka je potažena bavlněným potahem upevněným na pohodlný suchý zip, který umožňuje udržovat podložku v čistotě. Hroty umístěné na podložce vyvíjejí tlak na pokožku pod vlivem tělesné hmotnosti. Tím se zvýší průtok krve do namáhané oblasti těla, uvolní se svaly a zlepší se životní funkce.

TIP

Výrobek by měl být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.
V případě nekompletní dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

230 masážních rozet
Průměr růžice: 3 cm
Počet hrotů na růžici: 27
Odnímatelný kryt
Délka: 65 cm
Šířka: 41 cm
Výška: 2 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Začněte s krátkými sezeními (5-10 minut), aby si vaše tělo zvyklo na hroty.
Pro snížení intenzity tlaku můžete použít tenké tričko nebo ručník.

Vyhňte se použití v případě:

Otevřené rány, kožní léze nebo infekce.
Kožní onemocnění nebo přecitlivělost na dotek.
Poruchy krevního oběhu, hemofilie nebo užívání léků proti srážlivosti krve.
Těhotenství (doporučena konzultace s lékařem).

Během používání:

Ujistěte se, že je podložka umístěna na rovném povrchu.
Vyhňte se náhlému tlaku na pokožku – uvolněte se postupně.
Nepřekračujte 20-30 minut v jednom sezení.

Po použití:

Vstávejte pomalu, abyste se vyhnuli závratí.
Rohož čistěte otřením vlhkým hadříkem nebo podle pokynů výrobce.

Komentáře:

Pravidelné používání podložky může přinést nejlepší výsledky, ale vždy poslouchajte signály svého těla.
Máte-li jakékoli pochybnosti nebo zdravotní problémy, poradte se před použitím se svým lékařem.
Výrobek by měl být vždy používán tak, jak je určen.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.
Použitý obalový materiál je třeba odevzdat na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytují obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovožce

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10
internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl